

Celltac^{ES}

Automated Hematology Analyzer

MEK-7300K

Extremely simple

WBC 5 part differential



Reliable

Statistik yang disempurnakan

- Perhitungan yang disempurnakan untuk nilai PLT atau WBC yang rendah agar nilainya lebih terpercaya
- Ketika Nilai PLT atau WBC rendah, sampel akan ditambahkan secara otomatis oleh alat untuk dianalisis

Friendly

Pengoperasian sederhana (Stress free)

- Layar sentuh berwarna yang berukuran besar memberikan keleluasaan dalam proses pengoperasian alat.
- Dapat kembali ke mode awal dan proses pembersihan yang otomatis pada alat dapat mempersingkat waktu pengoperasian alat (saat alat dinyalakan dan dimatikan)

Efficient


Alur kerja yang singkat

- Hanya memerlukan 55µl sampel untuk pemeriksaan WBC
- Sampel sebanyak 10µl / 20µl dapat diukur dengan mode pre-dilusi
- Mode pengukuran yang digunakan : Terbuka, Tertutup, Pre-dilusi, WBC Tinggi dan WBC rendah

Kemenkes RI. AKL No. 20205717070

made in Japan

Fighting Disease with Electronics
NIHON KOHDEN

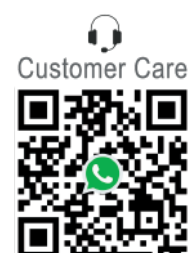

SCAN ME

Parameter	WBC, NE%, LY%, MO%, EO%. BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW
Metode Pengukuran	WBC, RBC, PLT - Metode Impedansi HCT - Kalkulasi Histogram HGB - Metode Surfactant WBC 5 Part Differensiasi - Metode Optik
Model Pengukuran	Terbuka Tertutup Pre-dilusi WBC Tinggi WBC Rendah
Waktu Pengukuran	± 60 detik/sampel
Volume Sampel	55µl (CBC + Diff), 30µl (CBC) untuk mode pengukuran normal 10µl atau 20µl untuk mode pre-dilusi
Penyimpanan data	15.000 data termasuk scattergram dan histogram dapat disimpan di SD Card
Layar LCD	10,4 inci, 800 x 600 titik TFT-LCD
Dimensi	382 x 465 x 532 (mm)
Bobot	± 35 kg

Reagen Original

Diluent : Isotonac 3
Hemolysing reagen : Hemolynac 3N & Hemolynac 5
Deterjen : Cleanac & Cleanac 3
QC Internal : Level Low, Normal, High
Kalibrator Internal

Option

Lebih dari 15.000 hasil
dapat disimpan

SD card

QM-001D

Y154D



Brosur ini dapat direvisi atau diubah sewaktu-waktu oleh Nihon Kohden tanpa pemberitahuan

Diproduksi oleh :

 **NIHON KOHDEN**
NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 (3) 5996-8036 Fax +81 (3) 5996-8100
www.nihonkohden.com

Diimpor dan didistribusikan :

 **PT. GANDASARI EKASATYA**
Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading
Jl. Kemanggisan Ilir Raya Blok C N0. 15B
Anggrek Neli Murni Jakarta 11480
Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129
E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id